



BETA
IMPLANTS

Guía para el tutor
TPLO

¿Qué es la TPLO?

La Tibial Plateau Levelling Osteotomy (TPLO) es una técnica quirúrgica en la que mediante un corte en la tibia, se nivela la superficie articular entre tibia y fémur con el objetivo de neutralizar las fuerzas que antes de la lesión soportaba el ligamento cruzado anterior.

¿Por qué usar TPLO?

La lesión de rotura de ligamento cruzado anterior produce cojera, dolor, inestabilidad articular y atrofia muscular. Con esta técnica ampliamente usada, tu mascota conseguirá una mejora considerable de su calidad de vida recuperando incluso el nivel de actividad previo a la lesión.



¿Qué ventajas tiene para mi mascota?

La TPLO supone un paso por quirófano para nuestra mascota a cambio de aportar una mejoría considerable en su calidad de vida ya que presenta las siguientes ventajas:



Técnica TPLO

- Alta tasa de éxito. Habitualmente la solución definitiva.
- Corto periodo de recuperación.
- Retorno temprano a actividad habitual.




Productos BETA

- Diseño especial para una cirugía más rápida y segura.
- Gran resistencia.
- Adaptación a la anatomía del húmero.

Y ahora... ¿Qué tengo que hacer?

Es de vital importancia para tu mascota que le ayudes durante su proceso de recuperación evitando cualquier tipo de complicación. ¡La prevención es fundamental!

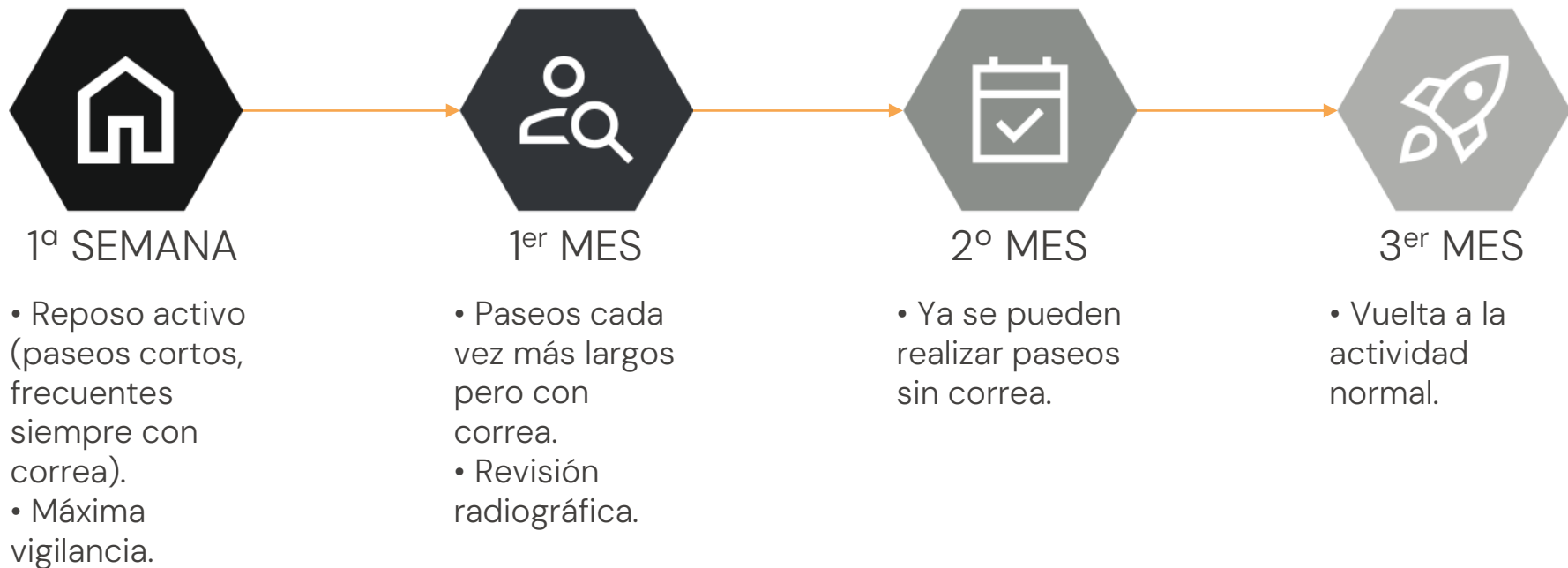

¡Cada mascota es única! Consulta con tu especialista los tiempos de recuperación exactos.

¿Cómo va a evolucionar mi mascota?

La vigilancia mejora el pronóstico. Si tu mascota no se recupera siguiendo esta evolución, consúltalo con tu veterinario.



Es importante recordar...

Tu mascota ha sufrido una lesión importante y por ello debemos de tener en consideración que:

1. La resistencia y vida útil del implante depende de la capacidad de osificación de tu mascota. En caso de que esta no sea correcta, hay riesgos de fractura / aflojamiento de los implantes.
2. Como cualquier cirugía, tiene riesgos de infección, complicaciones en la piel, reacciones alérgicas. Es importante extremar la vigilancia.
3. Los implantes no tienen la misma resistencia que un hueso normal sano. Es fundamental supervisar la actividad física y seguir las indicaciones de tu especialista.
4. Puede ser necesario retirar el implante por diversos motivos (infección, molestias, proximidad a vasos y raíces nerviosas, etc.).

Siempre atentos a tu mascota.

Desde BETA Implants, queremos agradecer que hayas elegido uno de nuestros implantes. Al hacerlo, tu mascota cuenta con el respaldo de nuestros ingenieros complementando así la gran labor de tu especialista de confianza.

Además, tras la cirugía, seguiremos pendientes para resolver a tiempo cualquier consulta que nos traslade tu traumatólogo.

¡Le deseamos una pronta recuperación a tu mascota!



De parte de todo el equipo de BETA Implants



Gracias!

